
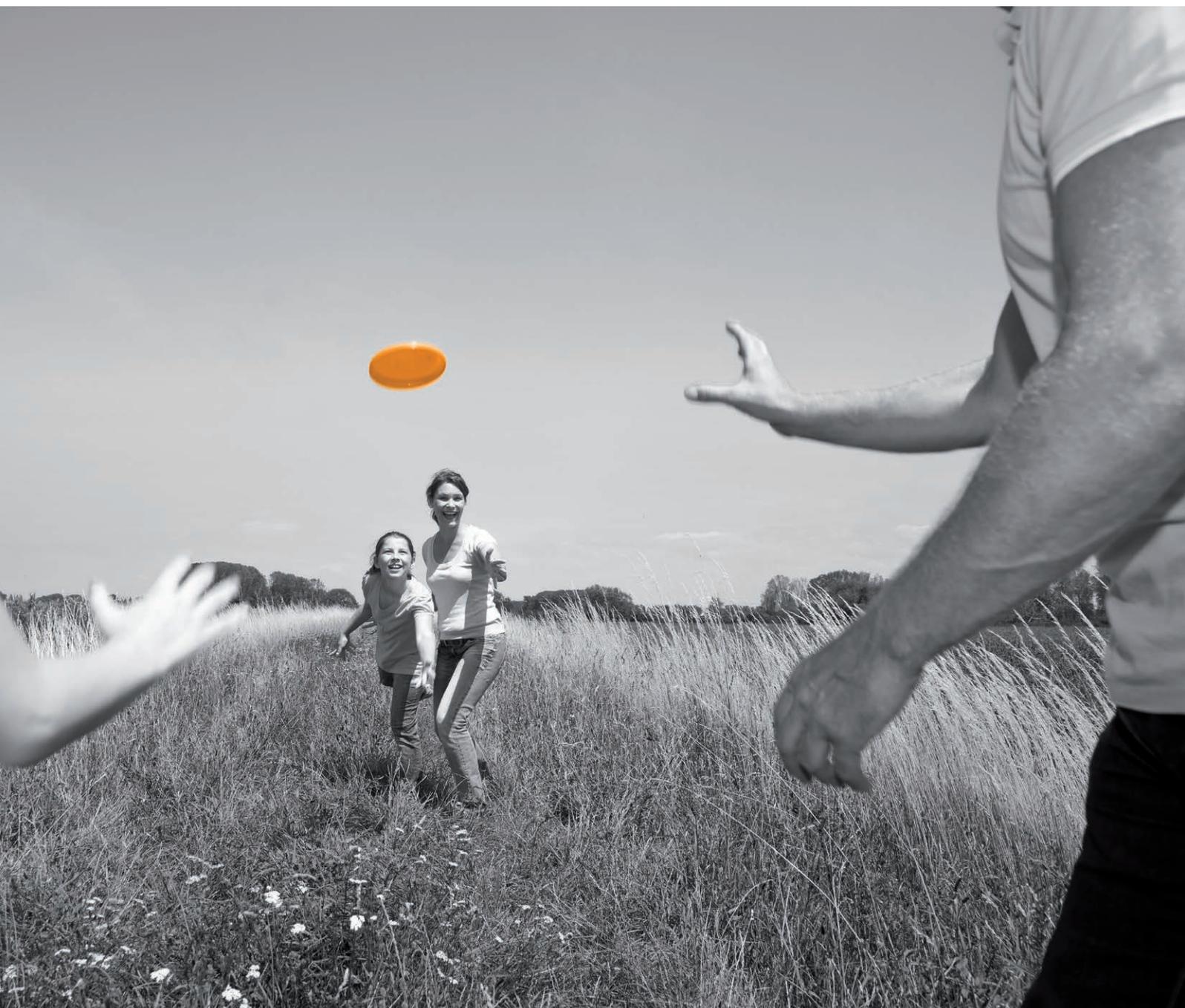


# Sophy® Mini SM1

La válvula monopresión  
Sophy® Mini

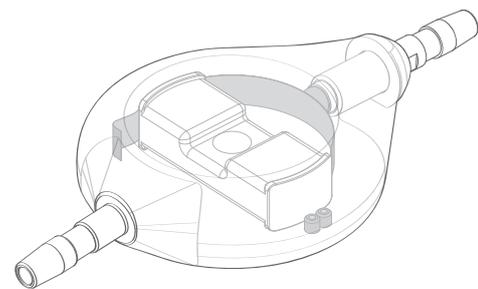

# Válvula Sophy® Mini SM1

La válvula fija Sophy® Mini (SM1) es una válvula de bola en cono, de perfil bajo y alta precisión. Tiene un tamaño pequeño y la forma de las válvulas ajustables Sophysa y está hecha del mismo material.

## Válvula de bajo perfil

Discreta y cómoda tanto para adultos como para niños.

## Cuerpo transparente de polisulfona





## Mecanismo de bola en cono

Precisión excepcional y fiabilidad demostrada.

## Indicadores de presión de funcionamiento

Identificación radiológica de la presión de funcionamiento entre las 3 presiones disponibles: 50, 110 y 170 mmH<sub>2</sub>O.

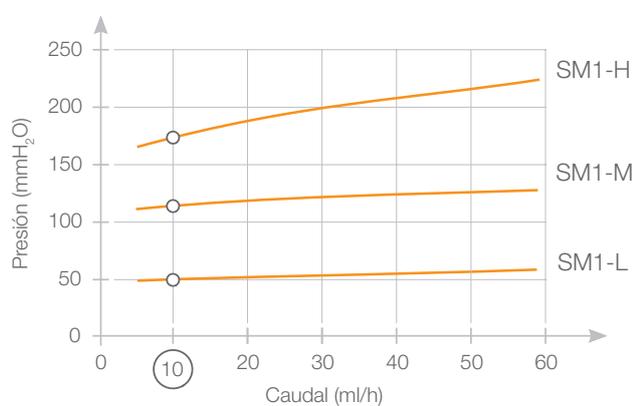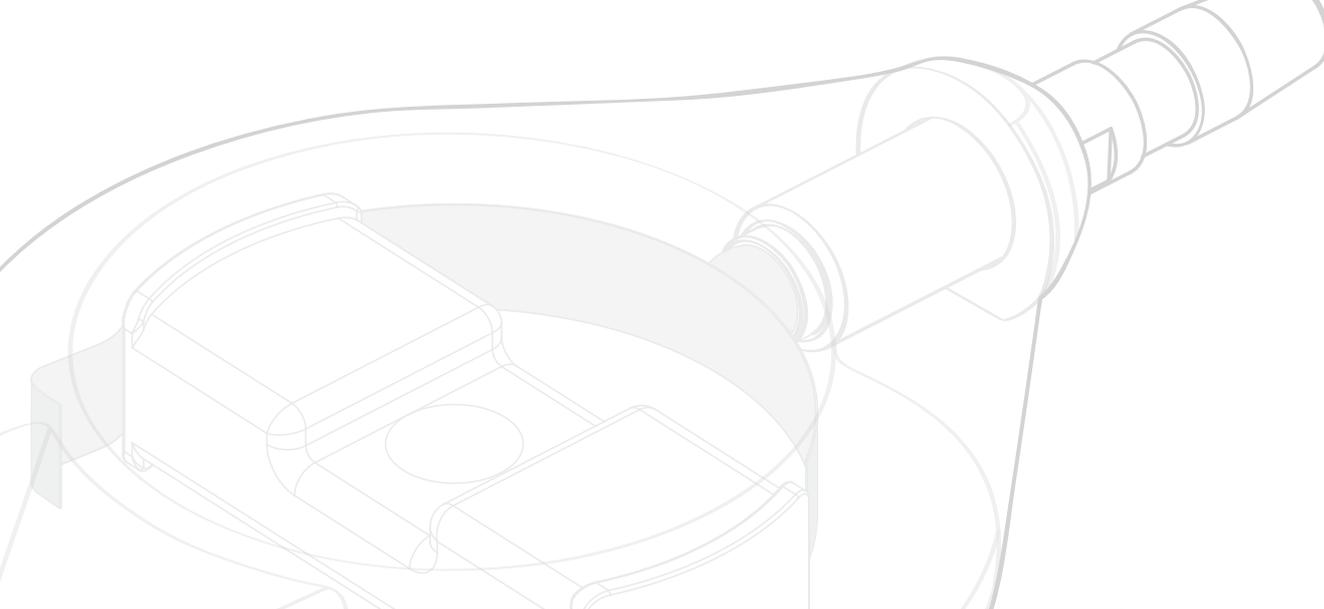

Están disponibles en tres presiones de funcionamiento:

- Baja = 50 mmH<sub>2</sub>O
- Media = 110 mmH<sub>2</sub>O
- Alta = 170 mmH<sub>2</sub>O

La identificación radiológica directa de la presión de funcionamiento es posible gracias a los puntos radiopacos en la válvula.

Válvula	SM1 - L	SM1 - M	SM1 - H
Identificación de la presión de funcionamiento	1 punto •	2 puntos ••	3 puntos •••
Identificación radiológica de la presión de funcionamiento			
mmH <sub>2</sub> O	50	110	170

La Sophy® Mini SM1 puede asociarse con SiphonX®, un dispositivo antisifón, que añade 200 mmH<sub>2</sub>O en posición vertical.

	Referencia	Denominación
--	------------	--------------

### Válvula sola



SM1-L	Válvula fija Sophy® Mini, presión baja, 50 mmH <sub>2</sub> O
SM1-M	Válvula fija Sophy® Mini, presión media, 110 mmH <sub>2</sub> O
SM1-H	Válvula fija Sophy® Mini, presión alta, 170 mmH <sub>2</sub> O

### Válvula con antecámara



SM1A-L	Válvula fija Sophy® Mini, presión baja, antecámara
SM1A-M	Válvula fija Sophy® Mini, presión media, antecámara
SM1A-H	Válvula fija Sophy® Mini, presión alta, antecámara

### Válvula con antecámara tipo "Burr-hole"



SM1B-L	Válvula fija Sophy® Mini, presión baja, con antecámara tipo "Burr-hole"
SM1B-M	Válvula fija Sophy® Mini, presión media, con antecámara tipo "Burr-hole"
SM1B-H	Válvula fija Sophy® Mini, presión alta, con antecámara tipo "Burr-hole"

### Dispositivo antisifón SiphonX® (+ 200 mmH<sub>2</sub>O en posición vertical)



SX-200	Dispositivo antisifón gravitacional SiphonX®
--------	--

### Kits de válvula completos Los kits de válvula Sophy® Mini SM1 incluyen un catéter ventricular separado y un catéter distal preconectado



SM1-2010L	Kit de válvula de presión baja Sophy® Mini SM1
SM1-2010M	Kit de válvula de presión media Sophy® Mini SM1
SM1-2010H	Kit de válvula de presión alta Sophy® Mini SM1



SM1A-2010L	Kit de válvula de presión baja Sophy® Mini SM1A
SM1A-2010M	Kit de válvula de presión media Sophy® Mini SM1A
SM1A-2010H	Kit de válvula de presión alta Sophy® Mini SM1A